



Cardio - Pulmonary
Diagnostics



Spiro2000

Pulmonary




Spiro2000

Die Lungenfunktions-Software für Profis

Spiro 2000 wurde entwickelt um den Anforderungen professioneller Lungenfunktionsuntersuchungen gerecht zu werden. Die Software ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen und bietet eine Vielzahl von Auswertungs- und Vergleichsmöglichkeiten, wie z.B. die grafische Trendanalyse oder den direkten Prä-/Post-Datenvergleich. Spiro2000 ist kompatibel mit allen aktuellen Windows Betriebssystemen und lässt sich wahlweise als Einzelplatz oder im lokalen Netzwerk betreiben. Die offene Datenbankbindung (ODBC) und die integrierten Datenschnittstellen XML & GDT ermöglichen einen einfachen Datenaustausch mit anderen Systemen, wie zum Beispiel

Krankenhausinformationssystemen (KIS) und diversen Praxisprogrammen. Eine Vielzahl von Parametern können vom Benutzer ausgewählt und für die Anzeige und den Ausdruck individuell angepasst werden.

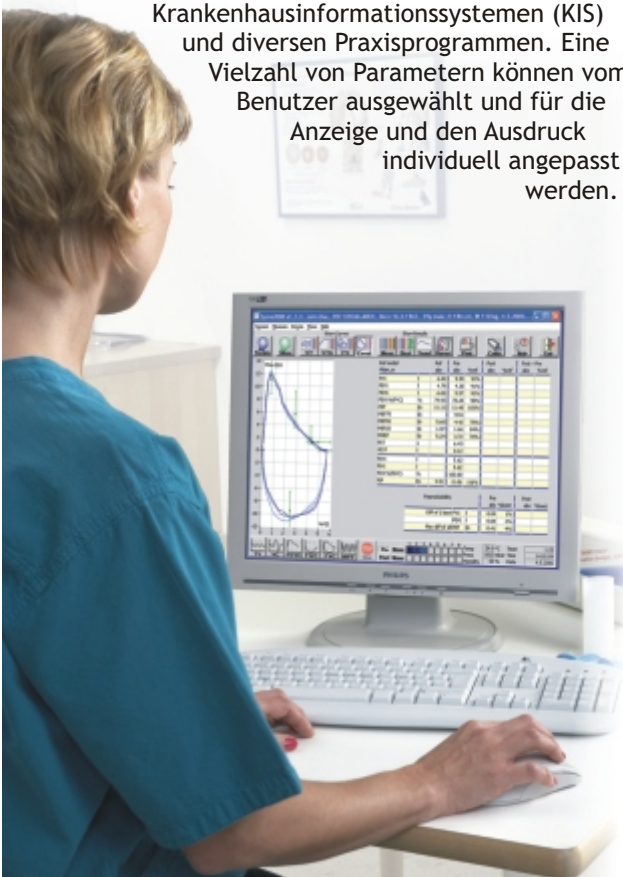

Der Gesamtreport wird als HTML Datei erstellt und lässt sich so ganz einfach zur weiteren Bearbeitung per E-Mail versenden. Die Kalibrierung des Systems wird automatisch dokumentiert und kann im Rahmen des Qualitätsmanagements jederzeit überprüft werden.

Leistungsmerkmale:

- BTPS Korrektur
- Fluss-Volumen Anzeige
- Verzögerungsindex
- Reproduzierbarkeitsindex
- Direkte Auswahl der besten Messung laut den Empfehlungen von ATS und ERS
- Animationsgrafik für Kinder und Erwachsene mit gleichzeitiger Überwachung wichtiger Messparameter

Technische Daten:

- 14 Sprachen verfügbar
- Freie Auswahl von insgesamt 58 Parametern für die Anzeige und den Ausdruck
- Netzwerkfähig
- Grafische Anzeige von VT, VT6, FV und der Fluss-Volumen Kurve
- Integrierte Qualitätskontrolle

